


1. Уверете се, че инфузионната система за разтвори с три метални игли е чиста и стерилна, и съберете необходимите материали.



2. Измийте ръцете си и поставете стерилни ръкавици.



3. Проверете опаковката за евентуални повреди.
4. Отворете опаковката, без да докосвате иглите.
5. Идентифицирайте трите метални игли: една за свързване с банката с разтвор, една за свързване с интравенозната канюла и една за контрол на потока от банката.
6. Почистете отвора на банката, където ще бъде вкарана едната игла с алкохолен тампон. Оставете да изсъхне.
7. Свържете иглата за свързване с банката с разтвор
8. Закачете банката на подходяща височина.

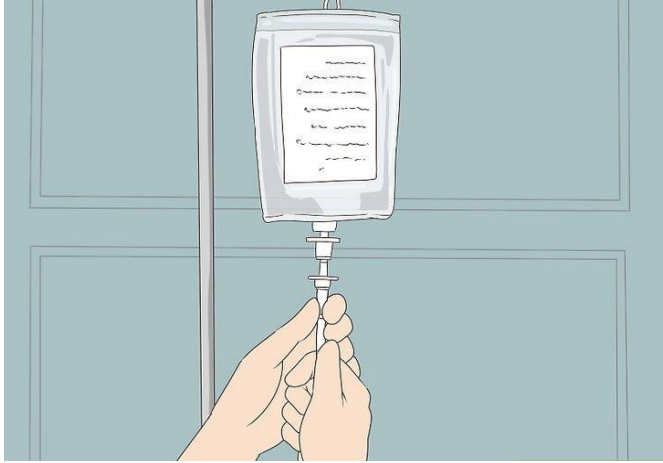

9. Свържете иглата за свързване с абоката на пациента, отворете клапата, следете скоростта на потока.

